

# Catalyst\* pancreaslipasetest (PL-test)


## Korte handleiding

### Vereisten ten aanzien van de bewaring en het gebruik

- In de vriezer bewaren (niet bewaren in de deur van de vriezer).
- Geen opwarming nodig; rechtstreeks vanuit de koelkast te gebruiken.
- Pancreaslipasetesten kunnen maximaal acht uur worden bewaard bij kamertemperatuur. Na acht uur moet u de testen in de vriezer bewaren.
- Aanbevolen hoeveelheid monstermateriaal:
  - Volbloed: 600-800 µl
  - Serum/plasma: 100 µl (65 µl als de test met andere slides wordt uitgevoerd)

### Alleen maar laden en klaar!

Catalyst One\* chemische analyzer

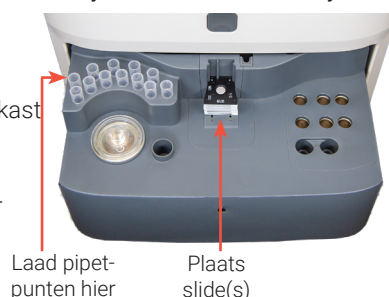

Catalyst Dx\* chemische analyzer



### Veelgestelde vragen

Vraag	Antwoord
Welke soorten monsters kunnen met de pancreaslipasetest worden verwerkt?	Tot de geschikte soorten monsters behoren serum, lithium-heparine-plasma en volbloed bij gebruik van de Catalyst* lithiumheparineseparator voor volbloed.
Welke diersoorten zijn gevalideerd voor de pancreaslipasetest en hoe worden de numerieke resultaten weergegeven?	De pancreaslipasetest is geschikt voor honden en katten. Numerieke resultaten van 30–2000 E/l voor honden en 0,5–50,0 E/l voor katten worden gerapporteerd.
Kan de pancreaslipasetest ook uitgevoerd worden met andere slides?	Ja! De test kan afzonderlijk of in combinatie met andere slides worden uitgevoerd als onderdeel van een uitgebreid patiëntprofiel. U kunt bijvoorbeeld een Catalyst* Lyte 4 CLIP, Catalyst* Chem 17 CLIP, Catalyst* SDMA-test en Catalyst* pancreaslipasetest uitvoeren met één patiëntmonster.
Moet de pancreaslipasetest bij gebruik van andere slides in een bepaalde volgorde worden geladen?	<ul style="list-style-type: none"><li>• De pancreaslipaseslide kan in elke volgorde na elektrolyten worden geladen.</li><li>• Bij de uitvoering van de pancreaslipasetest met elektrolytenslides moet u <b>altijd</b> eerst de elektrolytenslides laden.</li><li>• Om het <b>snelst</b> resultaten te verkrijgen, is de aanbevolen laadvolgorde Lyte 4 CLIP onderin, gevolgd door een chemie CLIP (bijv. Chem 17, Chem 15), de pancreaslipideslide en eventuele aanvullende slides en TT 4 bovenop.</li><li>• Laad altijd eerst pipettips in de lade voor iedere test. (Het maximaal aantal slides per test is 25 slides.)</li></ul>
Hoelang duurt de pancreaslipasetest?	De pancreaslipaseresultaten zijn ~9 minuten na de start van de test beschikbaar.
Kunnen monsters waarop een pancreaslipasetest wordt uitgevoerd, worden verdund?	IDEXX ondersteunt niet het gebruik van verdunde monsters bij het uitvoeren van de pancreaslipasetest.
Hoe vaak kunnen pancreaslipasetesten op kamertemperatuur worden bewaard en vervolgens weer in de vriezer worden geplaatst?	Zodra ze op kamertemperatuur zijn, kunnen de pancreaslipasetesten tot 5 keer opnieuw in de vriezer worden geplaatst mits ze niet worden geopend.
Wat als een pancreaslipasetest per ongeluk in de koelkast wordt geplaatst?	Elke test waarvan wordt vermoed dat deze in de koelkast is bewaard, moet worden weggegooid.