

## Catalyst\* SDMA-test


# Korte handleiding

### Vereisten ten aanzien van de bewaring en het gebruik

- In de vriezer bewaren (niet bewaren in de deur van de vriezer).
- Geen opwarming nodig; rechtstreeks vanuit de koelkast te gebruiken.
- De SDMA-testen kunnen tot acht uur worden bewaard bij kamertemperatuur. Na acht uur, moet u de SDMA-testen in de vriezer bewaren.
- Aanbevolen hoeveelheid monstermateriaal:
  - Volbloed: 600-800 µl
  - Serum/plasma: 100 µl (65 µl als de test met andere slides wordt uitgevoerd)

### Alleen maar laden en klaar!

#### Catalyst One\*

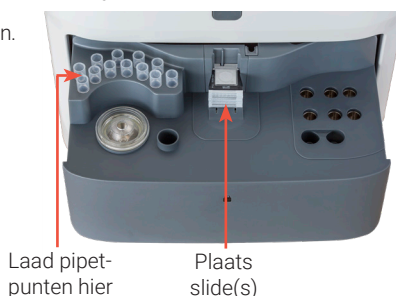

Laad pipetpunten hier

Plaats slide(s)

#### Catalyst Dx\*



Plaats slide(s)

Laad pipetpunten hier

### Veelgestelde vragen

Vraag	Antwoord
Moet ik iets anders verwerken samen met het SDMA-glaasje?	SDMA kan als losse slide gedraaid worden.
Welke soorten monsters kunnen met de SDMA-test worden verwerkt?	Geschikte monstertypes bestaan uit serum, lithiumheparine-plasma of volbloed bij gebruik van de Catalyst* Lithiumheparineseparator voor volbloed.
Kan ik eerder ingevroren monsters in de SDMA-test verwerken?	Nee, ingevroren monsters mogen niet worden gebruikt wanneer u de Catalyst SDMA-test uitvoert.
Welke diersoorten zijn gevalideerd voor de SDMA-test en hoe worden de numerieke resultaten weergegeven?	Honden en katten zijn compatibel met SDMA. De numerieke resultaten tussen 0-100 µg/dl zullen worden gerapporteerd.
Kan de SDMA-test met andere slides worden uitgevoerd?	Ja! De test kan afzonderlijk of in combinatie met andere slides worden uitgevoerd als onderdeel van een uitgebreid patiëntprofiel. U kunt bijvoorbeeld een Catalyst* Lyte 4 CLIP, Catalyst* Chem 17 CLIP, Catalyst* Totaal T <sub>4</sub> -test en Catalyst* SDMA-test doen met één patiëntmonster.
Moet de SDMA-test bij gebruik van andere slides in een bepaalde volgorde worden geladen?	<ul style="list-style-type: none"><li>• De SDMA-test kan in elke volgorde worden geladen na elektrolyten.</li><li>• Wanneer de SDMA-test wordt uitgevoerd met elektrolytenslides, laad dan <b>altijd</b> eerst de elektrolytenslides.</li><li>• Voor de <b>snelste</b> tijd tot resultaten voor SDMA, is de aanbevolen laadvolgorde Lyte 4 CLIP onderin, gevolgd door een chemie CLIP (bijv. Chem 17, Chem 10, enz.), SDMA, eventuele aanvullende slides en TT<sub>4</sub> bovenop.</li><li>• Laad altijd eerst pipettips in de lade voor iedere test. (het maximaal aantal slides per test is 25 glaasjes.)</li></ul>
Wat is de uitvoertijd van de SDMA-test?	De SDMA-resultaten zijn 8 minuten na de start van de test beschikbaar.
Kunnen monsters waarop een SDMA-test wordt uitgevoerd, worden verdund?	IDEXX ondersteunt het gebruik van verdunde monsters bij het uitvoeren van de Catalyst SDMA-test niet.
Hoe vaak kunnen SDMA-tests op kamertemperatuur worden bewaard en vervolgens in de vriezer worden teruggezet?	Zodra ze op kamertemperatuur zijn, kunnen de SDMA-tests tot 5 keer opnieuw in de vriezer worden geplaatst mits het foliezakje ongeopend blijft.
Wat als een SDMA-test per ongeluk in de koelkast wordt gedaan?	Iedere test die bewaard is in de koelkast, moet worden weggegooid.